

# DISPENSING (WEIGHING) BOOTH / REVERSE LAMINAR AIR FLOW

## MYCO7 - DB1100G2

### Aplikasi Penggunaan

- Farmasi: Penimbangan bahan baku (API).
- Laboratorium: Sampling bahan kimia/serbuk.
- Kosmetik: Pencampuran bahan steril.
- Food & Beverage: Penimbangan bahan baku higienis.



**Solusi perlindungan tingkat tinggi (Reverse Laminar Air Flow)** yang dirancang khusus untuk menjaga sterilitas produk sekaligus melindungi personel dari paparan debu atau material berbahaya selama proses penimbangan.



**Dengan standar ISO Class 5 (Grade A)**, unit ini memastikan lingkungan kerja Anda tetap bersih, aman, dan memenuhi standar regulasi industri terkini.

### Keunggulan Utama

- Filtrasi Maksimal: HEPA H14 (efisiensi 99,995%).
- Material Higienis: Full Stainless Steel 304.
- Standar Tinggi: ISO Class 5 (Grade A).
- Monitoring Real-time: Indikator tekanan & kualitas udara.
- Proteksi Total: Lindungi produk, personel, & lingkungan.


# DISPENSING (WEIGHING) BOOTH MYCO7 - DB1100G2



## Maksimumkan Keamanan & Presisi Penimbangan dengan MYCO7 - DB1100G2

### SPECIFICATIONS :

External dimension	: 1100 x 1200 x 2400 mm (W.D.H)
Internal dimension	: 1000 x 900 x 1900 mm (W.D.H)
Internal material	: stainless steel 304
External material	: stainless steel 304
Front sash door	: PVC strip curtain
Table	: Perforated stainless steel 304
Prefilter (primary)	: G4 efficiency of $\pm 90\%$
Secondary	: HEPA filter H13 efficiency of 99,95%
Main filter (final)	: HEPA filter H14 efficiency of 99,995%
Test Port	: Tersedia DOP/PAO Test Port
Cleanliness Class	: ISO Class 5 (Grade A) sesuai standar ISO 14644-1
Main fan	: @135 watt centrifugal blower, 350-410 CMH, 2800 RPM
Power Supply	: 220V, 1 Phase, 50/60 Hz.
Air flow velocity	: > 0,45 m/s with adjustable speed
Sterilization lamp	: 30 watt UVC germicidal lamp 254 nm
Work lamp	: 2unit @20 watt LED lamp (500-1000 lux)
Switches	: LED, UV, Fan & Power LCD display
Electrical socket	: 2 unit waterproof socket
Indicator 1	: Differential Pressure / magnehelic
Indicator 2	: Air Quality Monitor
Indicator 3	: hour meter

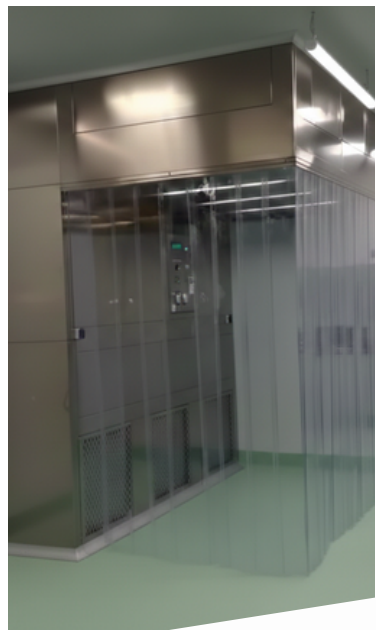

**MYCO7**

PRECISION · SAFETY · INNOVATION

